

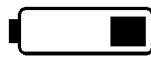
M2720A Avalon CTS 無線胎兒傳導器系統

警告及如何處理

主機台警告： 閃動，單獨或與任一側的燈號。 代表燈號是關閉 / 持續亮著。

 代表您聽見聲音警告（若是經過設定）。壓下  以將其靜音。

傳導器警告： 與代表問題來源的符號一起閃動。

| 若您得到此警告 ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ... 做此動作 ...                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... 在主機台端 ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ... 在傳導器端 ...                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|    +  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 置回傳導器以對其電池重新充電，或將傳導器換成充完電的傳導器。                                                                      |
|    +  |  +                                                                                              | 若在充完電 30 分鐘後仍然有問題，請更換傳導器電池。（請參閱《維護手冊》。）                                                             |
|    +  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 檢查此傳導器是否已啟動並在偵測範圍內。<br>檢查天線連接。                                                                      |
|                                                                                        |  +                                                                                              | 壓下  兩秒鐘，以解除遭阻斷的槽位。 |
|  範例床號                                                                                                                                                                                                                                                    |  +  + --                                                                                        | 此槽內已有一個 <b>啟動</b> 的傳導器（在範例內顯示該床號為 38）。                                                              |
|  範例床號                                                                                                                                                                                                                                                    |  +  + <br>範例床號 | 任一傳導器先置回，使此槽變為可用的<br>或者如果傳導器顯示某床號（在範例中為 16），則將傳導器放回其自身的主機台。                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  +                                                                                          | 呼叫維修人員（傳導器無法註冊）。                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  +                                                                                          | 若要啟動 ECG 傳導器，請連接導線。<br>將傳導器依據黑點指示的位置放入槽內（傳導器位於錯誤槽中）。                                                |
| 主機台及傳導器錯誤訊息 (E0 至 E9)：請參閱《使用說明》                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版權所有。  
列印於德國，2006 年 4 月  
文件號碼 M2720-9042B  
4512 610 15001

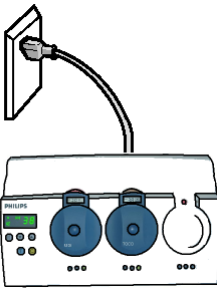
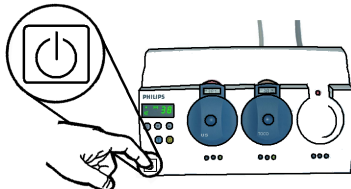


Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH  
Hewlett-Packard-Str.2  
71034 Boeblingen, Germany

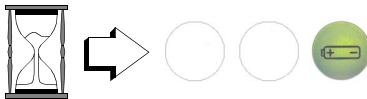
PHILIPS

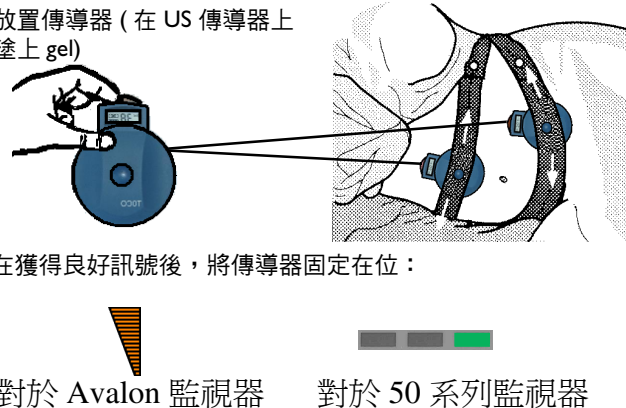
# M2720A Avalon CTS 無線胎兒傳導器系統

## 快速入門手冊

- 1** 110 - 240 V AC  

- 2** 開啟電源  

- 3**  

TELE

  
檢查胎兒監視器是否顯示「TELE」，表示 Avalon CTS 的連結良好
- 4** 等待「準備」燈號  

- 5** 移除傳導器  
「準備」燈號熄滅：「RF 連結」燈號亮起  

- 6** 放置傳導器 (在 US 傳導器上塗上 gel)  


| 從 US 監視變更至 DECG 監視 |                                                                                                             | 從 DECG 監視變更至 US 監視 |                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 置回 US 傳導器。                                                                                                  | 1                  | 從 ECG 傳導器拔除 DECG 轉接線及胎兒頭皮上的電極片。                                                                              |
| 2                  | 當槽中的燈號  為綠色時，移除 ECG 傳導器。 | 2                  | 置回 ECG 傳導器。                                                                                                  |
| 3                  | 將 DECG 轉接線及胎兒頭皮上的電極片連接至 ECG 傳導器。                                                                            | 3                  | 當槽中的燈號  為綠色時，移除 US 傳導器。 |
| 4                  | 開始 DECG 監視。                                                                                                 | 4                  | 開始胎心音監視。                                                                                                     |

使用 Avalon CTS 之前，將監視器上所有的有線式胎兒傳導器離線。

兩個啟動的傳導器傳送 FHR 至同一主機台將導致錯誤訊息 **E9**。欲將其清除，請將其中一個傳導器置回槽中。

**使用完畢：清理傳導器。**然後將其置回適當的主機台槽中。